

medartis®

PRECISION IN FIXATION

PRODUKTINFORMATION

Coronoidplatten 2.0




APTUS®
Elbow

APTUS® Elbow Coronoidplatten 2.0

Stabile Osteosynthese für Coronoidfrakturen
Anatomisch angepasst und winkelstabil


Plattenmerkmale

- Anatomisches Plattendesign für links und rechts
- TriLock – multidirektionale ($\pm 15^\circ$) und winkelstabile Verblockungstechnologie
- Schraubenwinkel intraoperativ korrigierbar und Feineinstellung der Frakturfragmente möglich
- Integriert und kompatibel mit dem bestehenden APTUS Ellenbogen-System 2.0
- K-Drahtlöcher zur temporären Platten- und Fragmentfixierung
- Biegsamkeit für individuelle Anpassung
- Kombination aus 2.0 TriLock Schrauben und Kortikalisschrauben

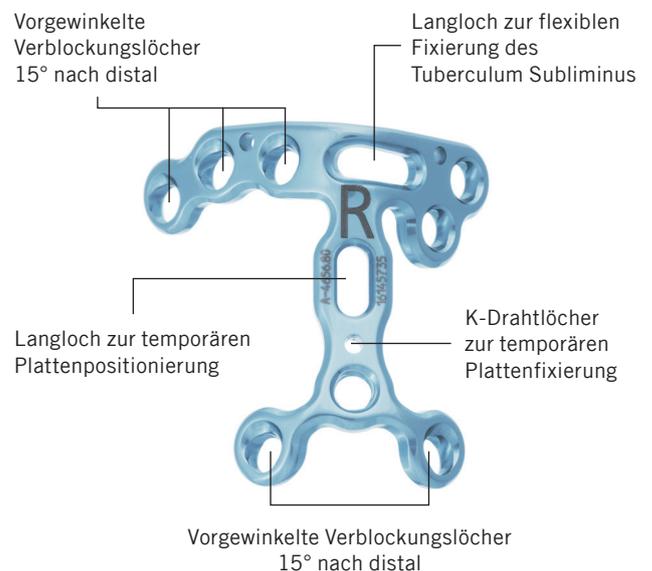

Klinische Vorteile


- Abstützung und Fixierung des Tuberculum Subliminus zur Wiederherstellung der Ellenbogenstabilität (indirekte Refixation des medialen Kollateralbands)
- Sowohl für anteriore als auch anteromediale Variante des Hotchkiss-Zugangs
- Subchondrale Schraubenplatzierung möglich
- Erhöhte Flexibilität bei der Schraubenpositionierung und -angulierung durch proximales Langloch
- Niedriges Plattenprofil, abgerundete Kanten und glatte Oberflächen zur Schonung der Weichteile
- Einheitlicher Schraubendurchmesser von 2.0 mm

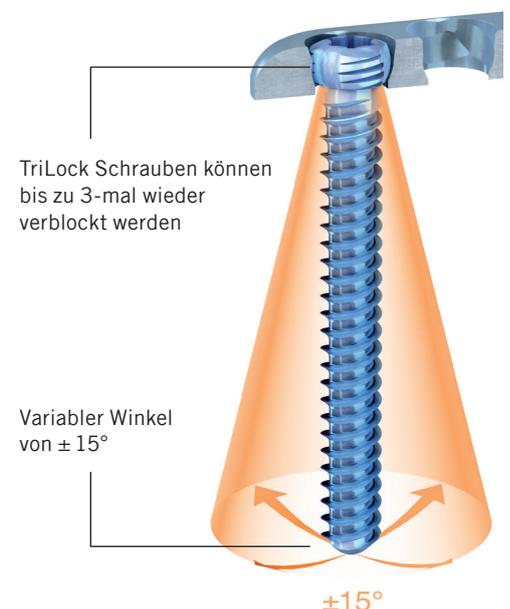

Bestellinformation


2.0 TriLock Coronoidplatten

Material: Titan (ASTM F67)
Plattendicke: 1.6 mm

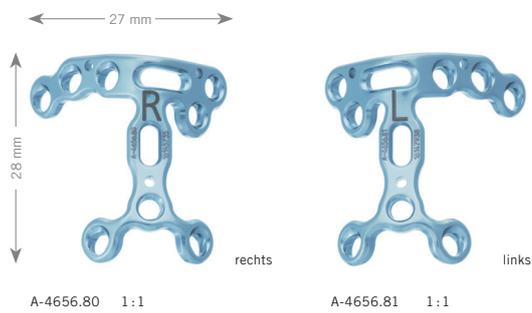

| Art. Nr. | Beschreibung | Löcher | Stk./Pkg. |
|-----------|--------------|--------|-----------|
| A-4656.80 | rechts | 10 | 1 |
| A-4656.81 | links | 10 | 1 |

Coronoidmodul

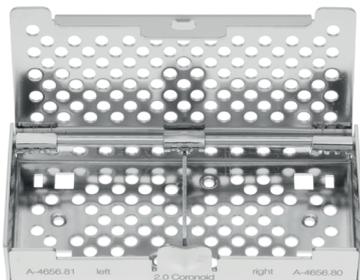

| Art. Nr. | Beschreibung | Stk./Pkg. |
|----------|--------------|-----------|
| A-6530.1 | für A-6530 | 1 |

ELBOW-03000000_v0 / © 2017-03, Medartis AG, Schweiz. Technische Änderungen vorbehalten.

HERSTELLER & HAUPTSITZ

Medartis AG | Hochbergerstrasse 60E | 4057 Basel/Schweiz
P +41 61 633 34 34 | F +41 61 633 34 00 | www.medartis.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Australien | Deutschland | Frankreich | Mexiko | Neuseeland | Österreich | Polen | UK | USA

Adressen und weitere Informationen bezüglich unserer Tochtergesellschaften und Distributoren siehe www.medartis.com

